



# ARMARIOS COLGADOS

SISTEMAS de ALMACENAMIENTO

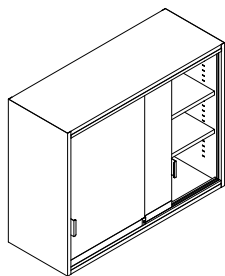

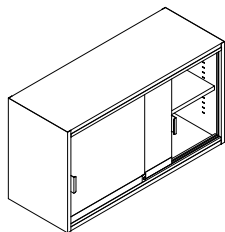

### DIMENSIONES

H : Altura

500/710 mm.

A : Anchura

600/900  
/1200/1500 mm.

P : Profundidad

350/500 mm.

### NORMATIVA

EN-14727



### ★DETALLES TÉCNICOS

Armario de almacenamiento fabricado en Acero AP02 laminado en frío con alta resistencia a la carga al fuego y revestido en pintura epoxídica electroestática de alta resistencia a los productos químicos y biológicos.

Ausencia exterior de remaches o tornillos, diseñado con paredes lisas, redondeadas y fáciles de limpiar proporcionando un alto nivel de Asepsia para entornos biológicos y/o sanitarios.

Puertas correderas o abatibles de doble cuerpo en acero AP02 con revestimiento de pintura epoxídica con bisagras de ángulo de apertura de 270° y sistema de amortiguación de ruidos en la versión de puertas ciegas.

Existen dos versiones con cristal, una con dos puertas correderas sobre ruedas de nylon que evitan que la puerta se convierta en un obstáculo para el personal del laboratorio y otra de cristal enmarcado en un bastidor de acero AP02 con revestimiento de pintura epoxídica con bisagras de ángulo de apertura de 270° y sistema de amortiguación de ruidos.

Entrepañó de acero recubierto con pintura epoxídica regulable en altura en las versiones de armarios con puertas o con frente abierto.

Alta resistencia a la carga, hasta 50 Kg por entrepaño.

Tirador de acero con revestimiento de pintura epoxídica integrado en la puerta y/o cajón sin necesidad de ningún tipo de tornillo o remache.

Los armarios colgados S\*Line son compatibles con los sistemas de servicios Fussion, Combo y Aero, existiendo la posibilidad de poderse ubicar en pared.

Posibilidad de Cerradura con bombín intercambiable.

### ★USO PREVISTO


Uso previsto para almacenamiento de aparatos y sustancias químicas conforme a EN 14727. Artículo no previsto para el almacenamiento de líquidos inflamables, bombonas de gas y sustancias inflamables o autodegradables. Tampoco es apto para guardar ácidos y bases.

### ★TIPOLOGÍAS


Existen diferentes tipologías: puertas ciegas, puertas correderas ciegas, puertas en vidrio, puertas correderas en vidrio y armario sin puertas.

# ARMARIO COLGADO METÁLICO


SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

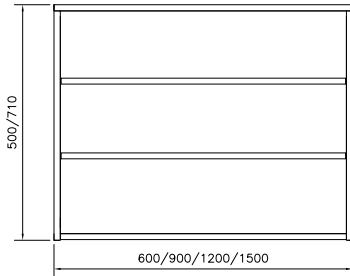


Sin puerta

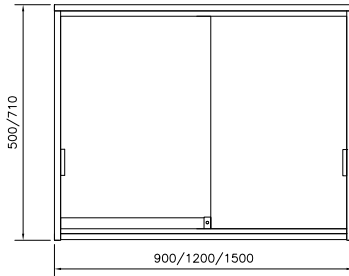


Puerta corredera ciega

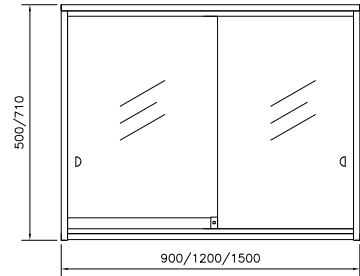


Puerta corredera de vidrio

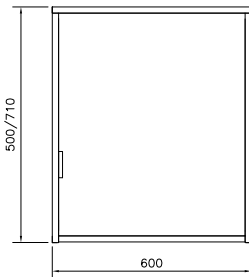


Puerta abatible ciega

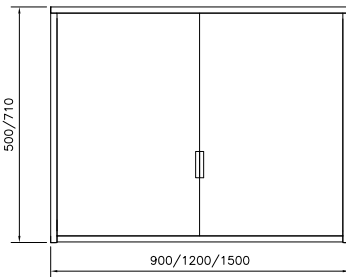

Puerta abatible ciega

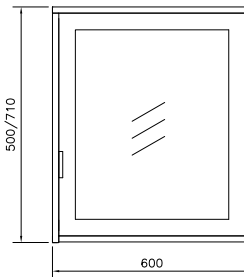

Puerta abatible de vidrio

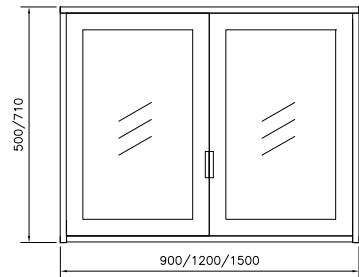

Puerta abatible de vidrio

# ARMARIO COLGADO METÁLICO