


FREGADEROS

MÓDULOS DE LAVADO



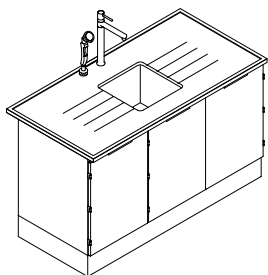

DIMENSIONES

H : Altura
900 mm.

A : Anchura
600/900/ 1200/1500 mm.

P : Profundidad
600/650/700/750/900 mm.

COMPLEMENTOS

Grifos
Ducha lavaojos
Escurre matraces
Pantalla de protección
Dispensadores de agua y jabón

NORMATIVA

EN-14727



★ USO PREVISTO

Los fregaderos son espacios de trabajo para suministro y recogida de agua, limpieza de medios especializados y alojamiento de cantidades de agua mayores. Este es un artículo inadecuado para el desecho de sustancias químicas.

★ DETALLES TÉCNICOS

Modulo de lavado compuesto por Módulo Fregadero, Fregadero y Grifo

★ MÓDULO FREGADERO

Fabricado en Acero AP02 laminado en frio con alta resistencia a la carga al fuego y revestido en pintura epoxidica electroestática de alta resistencia a los productos químicos y biológicos.

Ausencia exterior de remaches o tornillos, diseñado con paredes lisas, redondeadas y fáciles de limpiar proporcionando un alto nivel de Asepsia para entornos biológicos y/o sanitarios.

Rodapié en Acero de las mismas características técnicas provisto con cuatro pies niveladores ocultos adaptables a la irregularidades propias de cualquier tipo de suelo.

Puertas de doble cuerpo abatible con bisagras con ángulo de apertura de 270° y sistema de amortiguación de ruidos. Dispone de una puerta adicional con acceso a colector de residuos

Tirador de acero con revestimiento de pintura epoxídica integrado en la puerta sin necesidad de ningun tipo de tornillo o remache.

★ FREGADEROS

Superficie de trabajo disponible en gres, acero inoxidable, polipropileno y corian, cubriendo un amplio espectro de aplicaciones y necesidades dentro de cada laboratorio. Modulo de almacenamiento con enaglomerado melaminizado hidrófugo con base de recubrimiento metálico.

Este producto es compatible con los diferentes sistemas de servicios S*Line, pudiéndose instalar tambien como elemento individual.

★ OTRAS TIPOLOGÍAS MODULO BAJO FREGADERO DISPONIBLES

También se dispone de modulos fregadero de paneles de 19 mm de aglomerado de partículas de madera (D-s1-d0) revestido por ambas caras por papel decorativo impregnado con resinas melaminizadas, respondiendo a requisitos de la Norma Europea N 14322. Con los bordes perimetrales canteados en PVC de 2 mm a prueba de golpes.

★ FREGADERO D76A@6A

También se dispone de fregadero de 760x600 mm.

Dividing spaces, integrating furniture, uniting people

