


AERO-BOOM

SISTEMAS de SERVICIOS



Dividing spaces,
integrating furniture,
uniting people

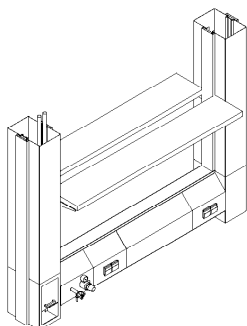

DIMENSIONES

H : Altura

352/980/1332 mm.

A : Anchura

1300/1500/1600/
1700/1800 mm.

Servicios

Suministro eléctrico.
Suministrosanitario.

★SISTEMA

Sistema de columna de servicios en acero BX-51D ancladas sobre estructura o forjado que permite dar servicio al plano de trabajo de una forma ergonómica. Fijado al techo, Ordena el espacio del laboratorio, conceptualizándolo como un entorno "open lab". Provisto de paneles de servicios intercambiables.

Incorporación del Hexakanal a lo largo del tramo deseado que permite canalizar y suministrar los servicios desde un solo punto de acometida.

★FUNCIONABILIDAD

Uso previsto para suministro de servicios (agua, electricidad, gases, extracción, iluminación) desde el techo a los siguientes elementos: mesas de laboratorio por debajo del módulo de servicios, equipamiento de laboratorio sobre mesas móviles de servicios y/o suelos y equipos propios de laboratorio.

Disponible en modelo simple o doble. Ofrece posibilidad de incorporar estanterías, armarios, embarrados, elementos dispensación de agua tratada. También tiene posibilidad de albergar conductos de extracción.

★SERVICIOS

Ofrece la posibilidad de incorporar conductos eléctricos principales con paneles de servicios para el suministro eléctrico. Conexiones opcionales para teléfono, ordenador, monitor y altavoz.

Luces opcionales integradas en los bordes de aletas (iluminación directa e indirecta), así como luz intensiva en el conducto eléctrico principal.

En cuanto a suministro sanitario posibilidad de incorporar paneles de servicios con valvulerías de salidad para vacío, gases o agua. Conductos de alimentación desde arriba hasta el alojamiento de suministro.

★DESMONTABILIDAD Y REUTILIZACIÓN

Desmontabilidad completa e independiente de todos los componentes.