



ARMARIOS SUELO. /

Dividing spaces · Integrating furniture · Uniting people
sistemas de almacenamiento



DETALLES TÉCNICOS

ARMARIOS SUELO | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Armario de almacenamiento fabricado en Acero AP02 laminado en frío con alta resistencia a la carga al fuego y revestido en pintura epoxídica electroestática de alta resistencia a los productos químicos y biológicos.

Ausencia exterior de remaches o tornillos, diseñado con paredes lisas, redondeadas y fáciles de limpiar proporcionando un alto nivel de Asepsia para entornos biológicos y/o sanitarios.

Puertas abatibles de doble cuerpo en acero AP02 con revestimiento de pintura epoxídica con bisagras de ángulo de apertura de 270° y sistema de amortiguación de ruidos en la versión de puertas ciegas.

En la versión de Puertas de cristal, los vidrios están enmarcados en un bastidor de acero AP02 con revestimiento de pintura epoxídica con bisagras de ángulo de apertura de 270° y sistema de amortiguación de ruidos.

Entrepaña de acero recubierto con pintura epoxídica regulable en altura en las versiones de armarios con puertas o con frente abierto.

Los armarios van provistos de 4 estantes con la posibilidad de añadir hasta un total de 6/8 estantes dependiendo de la altura del material a almacenar.

Alta resistencia a la carga, hasta 50 Kg por entrepaño.

Tirador de acero con revestimiento de pintura epoxídica integrado en la puerta y/o cajón sin necesidad de ningún tipo de tornillo o remache.

Armario con rodapié de acero AP02 con revestimiento de pintura epoxídica provisto de niveladores ocultos adaptables a las irregularidades propias de cualquier tipo de suelo.


Posibilidad de Cerradura con bombín intercambiable.

USO PREVISTO

ARMARIOS SUELO | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Uso previsto para almacenamiento de aparatos y sustancias químicas conforme a EN 14727. Artículo no previsto para el almacenamiento de líquidos inflamables, bombonas de gas y sustancias inflamables o auto degradables.

Tampoco es apto para guardar ácidos y bases.

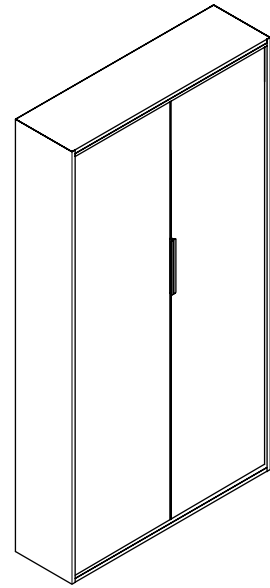

DIMENSIONES

H: Altura estándar

1050/1850 mm.

A: Modulación horizontal

450/600/900/1200 mm.

F: Fondo del armario

350/500 mm.


NORMATIVA

Según UNE-EN 14727:2006

Sistema de Armarios


Certificado Calidad Tecnalía

tecnalía
certificación

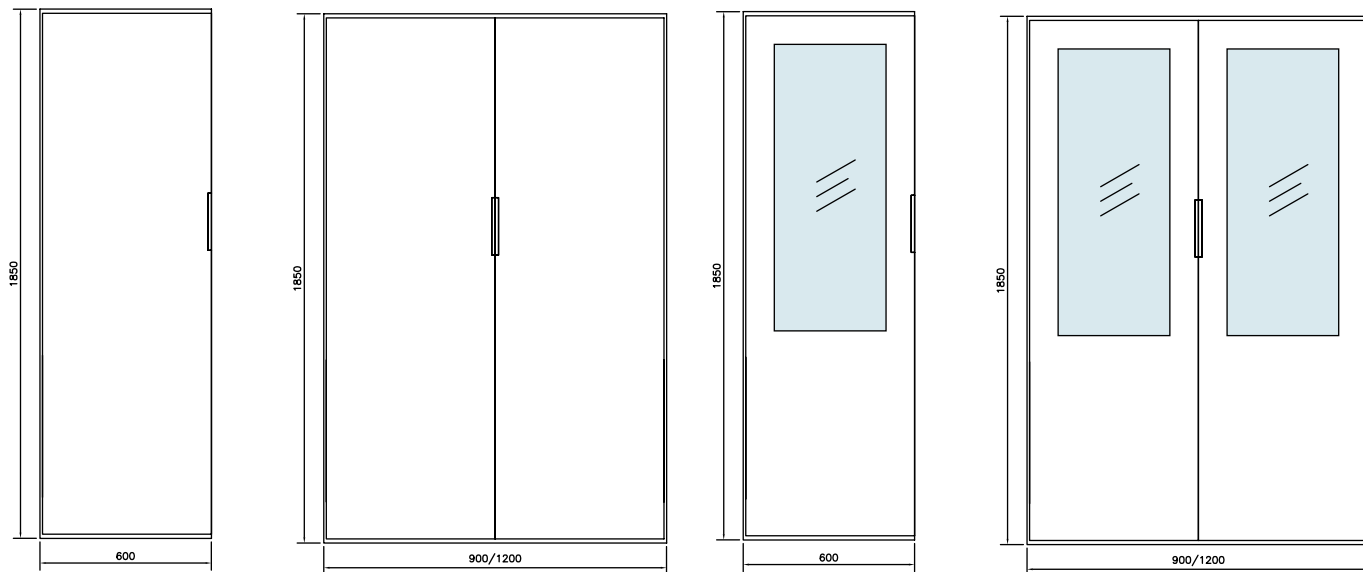

Armarios altos metálicos puerta ciega

A=450/600/900/1200
F=350/500
H=1050/1850

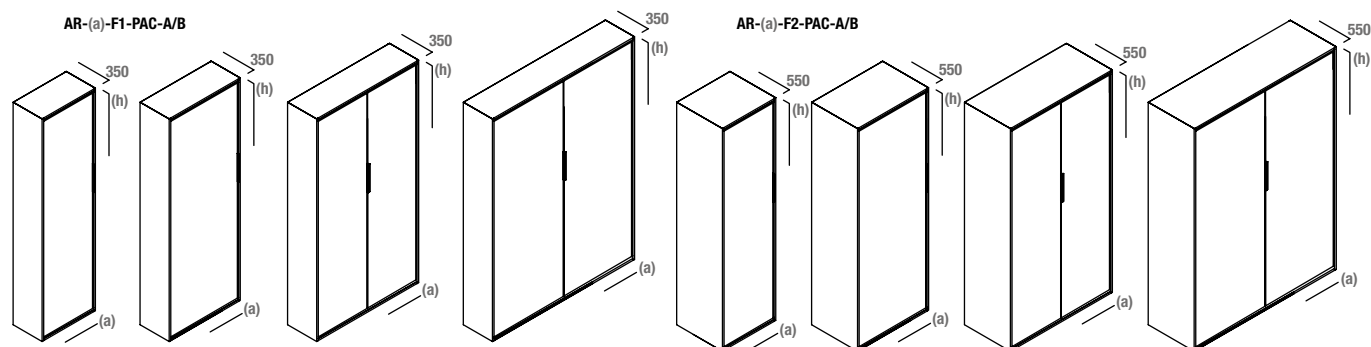

Armarios altos metálicos puerta vidrio

A=450/600/900/1200
F=350/500
H=1050/1850

