



MÓDULO  
SEMICIRCULAR. /  
Dividing spaces · Integrating furniture · Uniting people  
sistemas de almacenamiento



## DETALLES TÉCNICOS

### MÓDULO SEMICIRCULAR | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Módulo semicircular para estructuras de mesa, de almacenamiento fabricado en chapa de acero AP02 laminado en frío con alta resistencia a la carga al fuego y revestido en pintura epoxídica electroestática de alta resistencia a los productos químicos y biológicos.

Ausencia exterior de remaches o tornillos, diseñado con paredes lisas, redondeadas y fáciles de limpiar proporcionando un alto nivel de asepsia para entornos biológicos y/o sanitarios.

El rodapié en acero de las mismas características técnicas provisto con cuatro pies niveladores ocultos adaptables a las irregularidades propias de cualquier tipo de suelo.

Las puertas dobles de correderas de persiana con ángulo de apertura de 270° y sistema de amortiguación de ruidos.

Tirador de acero con revestimiento de pintura epoxídica integrado en la puerta sin necesidad de ningún tipo de tornillo o remache.

Alta resistencia a la carga, hasta 50 Kg por módulo.

## USO PREVISTO


### MÓDULO SEMICIRCULAR | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Almacenamiento de aparatos y sustancias químicas conforme a DIN EN 14727. Compatible con alturas de trabajo de 750 mm y 900 mm.

Artículo inadecuado para guardar líquidos inflamables, bombonas de gas y sustancias de inflamación espontánea o auto descomponibles.

Artículo inadecuado para guardar ácidos y bases.

Este producto es compatible con los diferentes sistemas de servicios S\*Line, pudiéndose instalar también como elemento individual.

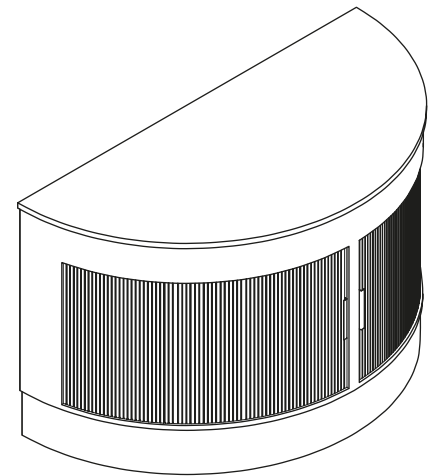

### DIMENSIONES

**H: Altura**

750/900 mm.

**A: Anchura**

1200/1500 mm.

**P: Profundidad**

600/650/700/750/850/900 mm.

### Módulo semicircular

A=1200/1500

